

VIVACE

La soluzione con Micro Needle e RF



Il Microneedling a RF più conosciuto al mondo

VIVACE

Inizia un nuovo viaggio nella Skincare con VIVACE, il microneedling con radiofrequenza che unisce in modo sinergico le due tecnologie per risultati ottimali.

I parametri personalizzabili di energia, diffusione termica e profondità dei micro aghi, assicurano un trattamento mirato e specifico, migliorando lo skin tightening, l'effetto lifting ed il ringiovanimento cutaneo.

Un successo mondiale celebrato dai risultati di un viaggio che offre una bellezza senza tempo.



Caratteristiche di VIVACE

Radiofrequenza
1MHz / 2 MHz

**Profondità dei
micro aghi**
Da 0,5 mm a 3,5 mm
(step di 0,1mm)

Tipologia micro aghi
Isolati e non isolati
(36 per testina)

Tempo emissione RF
Da 100 ms a 800 ms
(step di 100 ms)

Tipo di Led
Rosso/blu

Tipo di Motore
Step (passo-passo)

Controllo
Manipolo o pedale


Erogazione dell'energia
Chevron pattern

Tips con micro aghi

< Isolati per skin tightening >


< Non isolati per cicatrici e pore size >

▼ Tip con micro aghi isolati

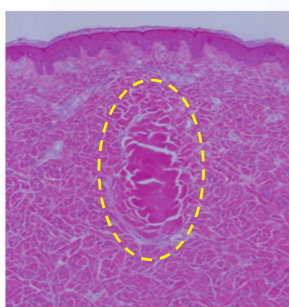

Agisce a livello
dermico, preservando
l'epidermide


▼ Tip con micro aghi non isolati

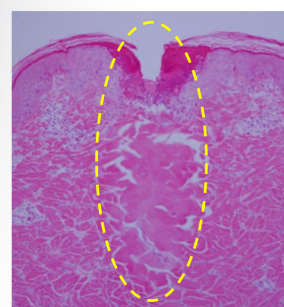

Crea zone di
coagulazione e
stimolazione
dermo-epidermiche


La tecnologia pain reduction di VIVACE

Pattern a Chevron di VIVACE

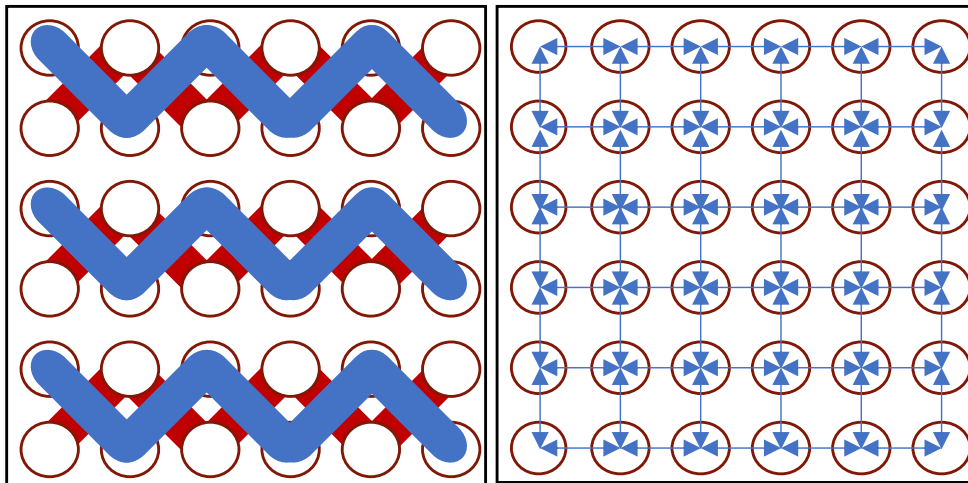

Il pattern a Chevron di VIVACE eroga radiofrequenza in modo uniforme, favorendo la trasmissione dell'energia in modalità 3D omnidirezionale, migliorando la compliance del trattamento e la distribuzione dell'effetto termico generato. Il controllo robotizzato della testina contribuisce al comfort e alla mini invasività del trattamento.

Pattern standard del microneedling a RF

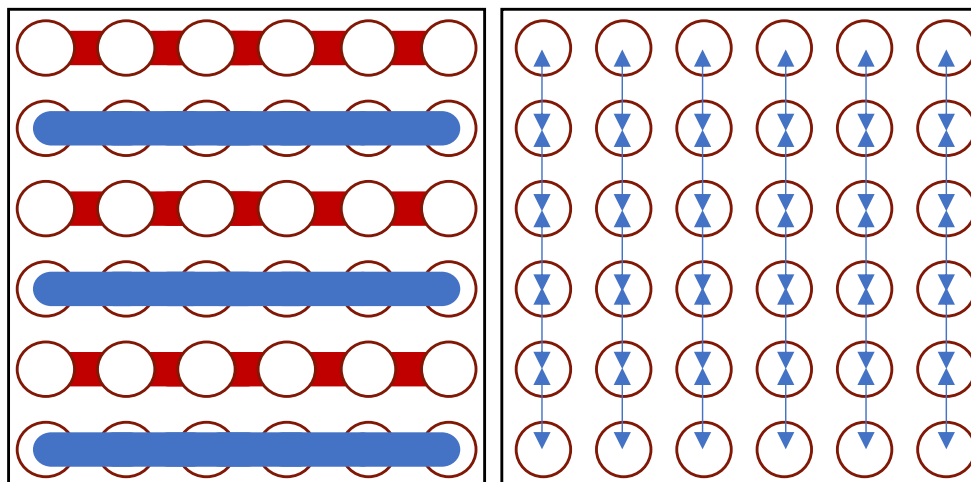

Perchè scegliere VIVACE

- **Doppia frequenza disponibile 1MHz, 2Mhz**
Diverse opzioni terapeutiche
- **Controllo robotizzato del movimento**
Maggior comfort, movimento fluido dei micro aghi
- **Trattamento rapido, breve downtime post trattamento**
- **Effetto massimizzato, maggiore tollerabilità**



Indicazioni

Lifting

Ringiovanimento
Cutaneo

Skin
Tightening

Cicatrici
da Acne

Rughe

Acne

Smagliature



Caratteristiche di VIVACE

Selezione della frequenza RF 1MHz o 2MHz



Tecnologia per la riduzione del dolore

Movimento Robotizzato della testina

Trasmissione RF con pattern incrociato

Testina con micro aghi isolati e non isolati

Diverse modalità di trattamento

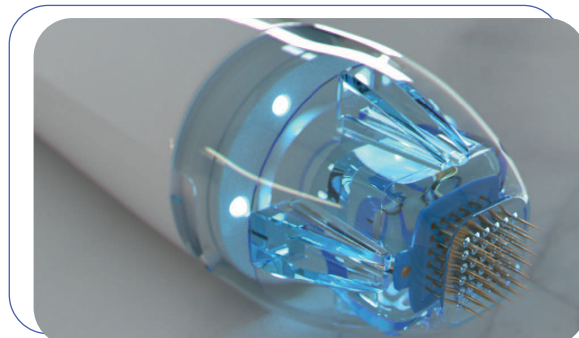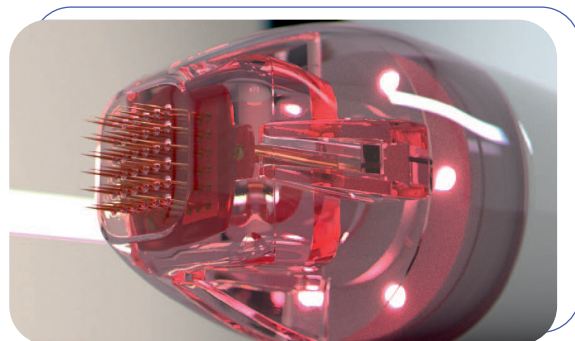

Casi clinici, prima e dopo

Riduzione delle rughe


Rafforzamento dell'ovale del viso

Miglioramento del tono cutaneo



Riduzione delle rughe profonde e sottili


Miglioramento della texture della pelle

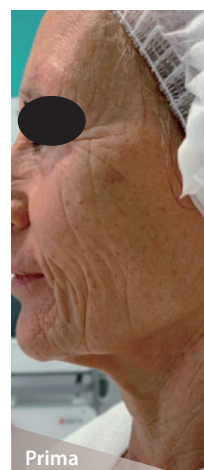

Riduzione dell'acne vulgaris


Miglioramento delle cicatrici da acne

Miglioramento del tono cutaneo

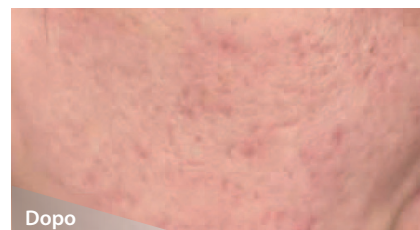

Riduzione delle smagliature

Miglioramento della texture cutanea

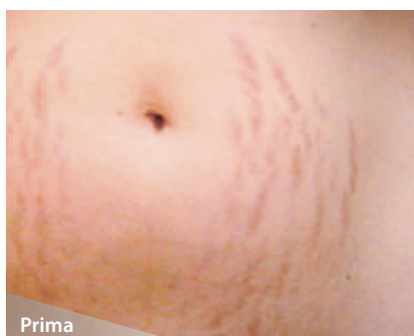

Casi clinici, prima e dopo

Cicatrici da Acne

Per gentile concessione del
Dr. Matteo Auriemma, Pescara



Lassità del collo



Lassità del collo



Lassità Braccia

Per gentile concessione della
Dr.ssa Stefania Belletti, Milano



Miglioramento della texture cutanea



VIVACE

Tipo di energia	Radiofrequenza
Livello RF	1 – 10
Profondità	0.5 – 3.5mm
Memoria	P1 – P4
Durata RF	100 – 800ms
Colore Diodo	Rosso 660nm, Blu 470nm
Frequenza	1 MHz, 2 MHz
Controllo	Pedale, manipolo
Display	10.4 inch LCD Touch Screen
Potenza	30W a 2MHz - 70W a 1MHz
Dimensioni	385 x 340 x 1200mm
Peso	24 kg
Tipologia micro aghi	36 Isolati e non Isolati da 300 micron



www.shenb.com



SHENB Bldg, 148, Seongsui-ro, Seongdong-gu, Seul, Corea del Sud
Tel. +82.2.466.0010 - Fax +82.2.466.5473
Email sales@shenb.com (estero)

©2024, SHENB Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
SHENB, il relativo logo e VIVACE sono marchi registrati di SHENB.
Questo prodotto o il suo utilizzo è coperto da uno o più brevetti o domande di brevetto coreani e stranieri. Il design e le specifiche del sistema o dei manipoli sono soggetti a modifiche senza preavviso.



www.renaissancelaser.it

importatore/distributore
esclusivo per l'Italia



DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 50041
Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com